


REX & PENGUIN

PARA LOS MÁS PEQUEÑOS

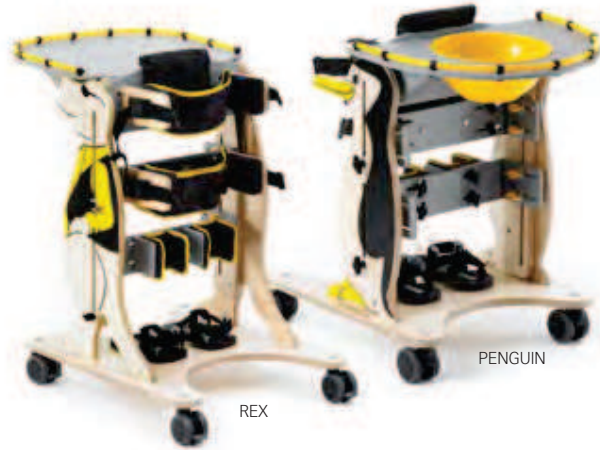

REX

PENGUIN

Estar de pié es la mejor manera para que los niños con afectaciones moderadas puedan aumentar su fuerza muscular. Para ser eficaces, los bipedestadores deben tener la capacidad de adaptarse de forma correcta a las necesidades de los niños en bipedestación. Esto significa que el bipedestador necesita tener un ajuste en 3 planos, como es el caso de Rex y Penguin. Penguin y Rex han sido diseñados para ofrecer un excelente apoyo en posición bípeda y la gama de opciones en soporte y en ajuste disponibles hacen que sean adecuados para niños de edades comprendidas entre los 18 meses y los 7 años de edad.

CUADRO DE MEDIDAS	REX	PENGUIN
EDAD	3-7 AÑOS	18 MESES-4 AÑOS
MEDIDAS BASE	70X58,8	60X50
DISTANCIA PECHO-PLATAFORMA	70-100	60-80
ANCHO PECHO	20,5-30	15-25
ANCHO SOPORTES CADERA	29-74	20-59
ANCHO MESA	60	53
PROFUNDIDAD MESA	39	36
CARGA MÁXIMA	35KG	25KG



ESPECIFICACIONES STD

- Soportes de cadera y rodillas ajustables en altura.
- Sandalias multirregulares.
- Ángulo de bandeja ajustable.

REX

- Para niños de 3 a 7 años.

PENGUIN

- Para niños de 18 meses a 4 años.



SOPORTES DE TRONCO, PÉLVICOS Y DE RODILLAS



SANDALIAS



BANDEJA

CAT 2

VERSÁTIL Y ECOLÓGICO



ESPECIFICACIONES STD

- Acolchado pélvico.
- Acolchado torácico.
- Cinturón de seguridad.
- Pistón con freno manual.
- Estructura con ruedas equipadas con frenos.
- Reposacabezas ajustables para posición supino.
- Mesa.
- Separador de rodillas.
- Estabilizador de tobillo.



REPOSACABEZAS PARA POSICIÓN SUPINO



ÁNGULO DE INCLINACIÓN HASTA HORIZONTAL PARA FACILITAR TRANSFERENCIA



PISTÓN DE GAS PARA FIJAR EL ÁNGULO DE POSICIÓN DESEADO

Cat 2 permite la bipedestación, así como la posición prona o supina. Sin duda, cualquiera de sus posiciones son muy beneficiosas para el desarrollo de los niños.

Podemos cambiar la alineación de este dispositivo, así como el ángulo de inclinación con la ayuda de resorte de gas. Además, podemos fácilmente cambiar la posición de un niño de pié a tumbado. Con los apoyos laterales y sus cinturones, además de proteger a los niños, facilitan la posibilidad de divertirse, aprender e incluso comer estando de pie con el Cat 2.

Cat 2 está fabricado en madera ecológica.

CUADRO DE MEDIDAS	CAT 2	
	POSICIÓN	
	SUPINO	PRONO
ANCHO TOTAL	60	
LONGITUD TOTAL	81	
ALTURA TOTAL	*98	
ANCHO DE PELVIS	19-32	
ANCHO DE PECHO	19-32	
LARGO RODILLA PIE	14-55	
ALTURA DE PIE AXILA	49-97	54-97
DISTANCIA ENTRE RODILLAS	15-23	
LARGO PLATAFORMA PIE	-	
ALTURA USUARIO	75-135	95-135
DISTANCIA PELVIS-AXILA	16-30	
CARGA MÁXIMA	45KG	
PESO	24KG	

* Sin reposacabezas