

BasiX2





**Gran resistencia, con
ajustes rápidos y sencillos**

Características Standard

- Estructura de aluminio, plegable, con cruceta de 3 brazos
- Tapicería de asiento nylon acolchado, ajustable en tensión
- Tapicería del respaldo ajustable en tensión
- Profundidad de asiento de 43.5 cm, ajustable de 41 a 46 cm
- Respaldo regulable en altura de 41 a 46 cm
- Centro de gravedad ajustable (+5 cm; -5 cm)
- Ángulo de asiento ajustable (0°, 3°, 6°)
- Plataformas reposapiés ajustables en ángulo (+ / - 15°)
- Reposabrazos abatibles y regulables en altura (mediante herramientas) y en longitud
- Altura de asiento de 47.5 cm (ajustable de 42.5 a 50.5 cm)
- Hangers a 70° (longitud de pierna ajustable de 35 a 50 cm)
- Ruedas delanteras 8" x 1/4" macizas



Cojín Jay Basic opcional


Funcionalidad, rápidos y sencillos ajustes

Breezy BasiX2 permite realizar sencillos ajustes en el asiento, respaldo, reposabrazos, reposapiés y horquilla para adaptar la silla a las diferentes necesidades y tipos de usuarios. Permite regular: la profundidad, la altura y el ángulo del asiento, la altura del respaldo, el centro de gravedad y la longitud del reposabrazos.


Con tapicería de asiento de nylon acolchado y tapicería de respaldo ajustable en tensión para un mayor confort.



Diseño robusto de la horquilla, que permite regular el ángulo de asiento de 0° a 6°.

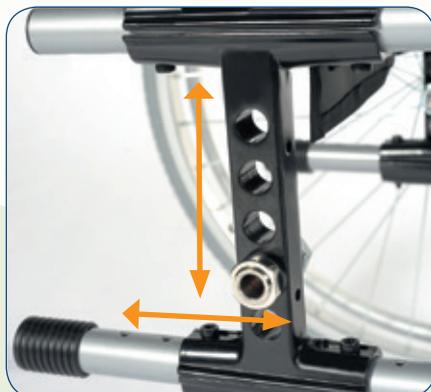

Diseño abierto de armazón que permite un ajuste en profundidad de 41-46 cm, ajuste en altura de las ruedas traseras y del centro de gravedad (+5 a -5 cm).

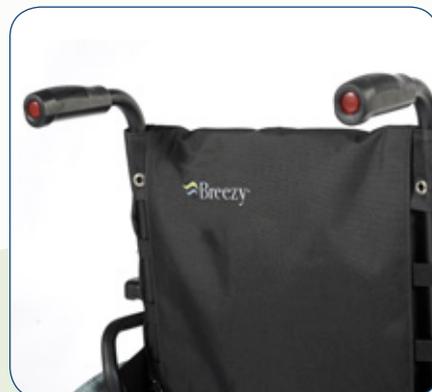


Tapicería ajustable en tensión mediante velcros en la parte superior del respaldo y mediante cintas en la zona lumbar

Resistente y fácil de transportar

Con estructura de aluminio de gran resistencia y cruceta de 3 brazos que aporta gran rigidez a la silla.

Además es compacta y fácil de transportar. Gracias a los reposapiés extraíbles y al sistema de desmontaje de las ruedas, la BasiX2 plegada queda reducida a sólo 30 cm de anchura.

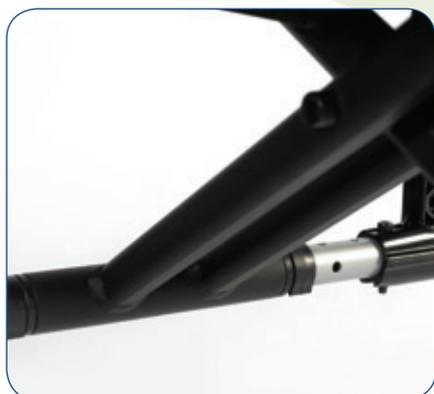

Cruceta de 3 brazos para un mayor soporte y rigidez



Reposapiés abatibles y desmontables con desenclavador ergonómico, robusto y accesible



Respaldo partido para un mejor transporte y almacenaje (opcional)

Opciones y accesorios

- Reposapiés elevables
- Respaldo reclinable (7° a 30°)
- Respaldo partido
- Cinturón de Posicionamiento
- Frenos de tambor
- Barra estabilizadora
- Ruedas anti vuelcos
- Extensión para el respaldo
- Ruedas de tránsito de 3"
- Protectores de radios
- Soporte bastones
- Mesa abatible
- Soporte amputados
- Ruedas traseras de 12"
- Cojín
- Reposabrazos regulable en altura
- Alargador de freno
- Reposacabezas



BasiX2


Gran resistencia, con ajustes rápidos y sencillos

BasiX2:




38 a 52* cm


Ajustable
41 a 46 cm

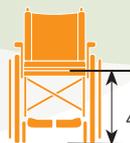

Ajustable
42,5 a 50,5 cm

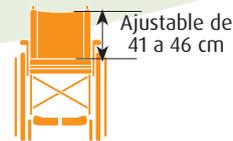


Ajustable de
41 a 46 cm

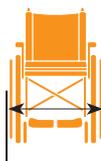


AA + 19 cm (24")

AA + 21 cm (24" y frenos de tambor)

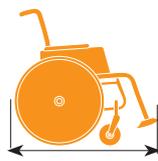

106 cm

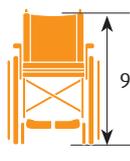

95 cm

* no disponible en todos los modelos

Especificaciones técnicas

Anchura de asiento:	38 / 40,5 / 43 / 45,5 / 48 / 52 cm*	Color de armazón:	Gris plata brillante
Profundidad de asiento:	43,5 cm (ajustable de 41 a 46 cm)	Color de la tapicería:	Negro
Altura de asiento:	47,5 cm (ajustable de 42,5 a 50,5 cm)	Longitud de pierna:	35 a 50 cm (ajustable)
Altura de respaldo:	43,5 cm (ajustable de 41 a 46 cm)	Peso máximo de usuario:	125 kg
Anchura total:	Ancho de asiento + 19 cm (ruedas 24")	Peso máx.:	14.9 kg (silla completa)
Longitud total:	106 cm	Peso de la parte mínima más pesada:	8.4 Kg (armazón**)
Altura total:	95 cm	Anchura plegada: (con ruedas)	30 cm (24 cm sin ruedas traseras)
Ángulo de asiento:	0° / 3° / 6° (ajustable)	Radio de giro:	desde 85 cm

** Sin reposapiés, ruedas, ni protectores laterales

Para ampliar información sobre opciones y disponibilidad por favor consulte la hoja de pedido.

Nuestros productos están en constante proceso de mejora, por lo que Sunrise Medical se reserva el derecho de cambiar el diseño de los mismos y las especificaciones indicadas sin previo aviso

Tolerancia de Fábrica: +/- 1 cm



Sunrise Medical S.L

Polígono Bakiola, 41
48498 Arrankudiaga
Vizcaya, España

Tel: 902 14 24 34

Fax: 94 648 15 75

www.SunriseMedical.es