

Aquatec® | **Sillas de ducha**



Aquatec **Ocean, Ocean XL, Ocean Vip, Ocean E-Vip**

Aquatec **Ocean** ofrece una gama completa de sillas de ducha para satisfacer todas las necesidades tanto de pacientes como de cuidadores. Ofrece el modelo correcto para todas las necesidades.

AQUATEC®



Yes, you can.®



- Chasis estable de acero inoxidable
- Altura de asiento ajustable individualmente: no requiere herramientas
- Respaldo ajustable en tensión y lavable a máquina.
- Barra de empuje con ahorro de espacio para una colocación óptima sobre el inodoro
- Reposabrazos ergonómicos y abatibles
- Reposapiés ajustables en altura y extraíbles para facilitar transferencias.
- Paletas con textura, abatibles y con cinta soporte de pies para mayor seguridad.

La **Ocean** está disponible en 3 versiones :

- Version estándar con ruedas pequeñas
- Versión con rueda de 24"
- Versión XL



Ocean

Silla estándar con 4 ruedas macizas con freno.



Ocean 24"

Silla auto-propulsable, dos ruedas macizas 24" adicionales fácilmente extraíbles, se puede utilizar como estándar o autopropulsable.



Ocean XL

Silla de ducha con mayor espacio entre los reposabrazos, y reforzada para un peso máximo de usuario de hasta 180kgs.

Características y opciones



Ajustes de altura sin herramientas.



Sistema de montaje rápido

Se puede montar y desmontar en pocos minutos



Chasis de acero inoxidable eficaz incluso en medios tratados.



- Chasis estable de acero inoxidable
- Basculación de asiento ajustable individualmente (de 0° - 35°)
- Pistón de gas de acero inoxidable.
- Extremadamente estable incluso basculada al máximo.
- Altura de asiento ajustable en 3 posiciones, no se requieren herramientas.
- Asiento cómodo, ergonómico y anatómico.
- Respaldo ajustable en tensión y lavable a máquina.
- Reposapiés ajustables en altura y extraíbles para facilitar transferencias.
- Paletas con textura, abatibles y con cinta soporte de pies para mayor seguridad.

La **Ocean Vip** está disponible en 3 versiones :

- 1470000 **Ocean Vip** básica sin guías y sin cubeta
- 1470712 **Ocean Vip** básica con guías para cubeta (no incluye cubeta y tapa)
- 1470713 **Ocean Vip** completa, con guías y asiento confort (no incluye cubeta y tapa)

Características y opciones



Basculación

Angulo de basculación 0° - 35°.



Reposacabezas

Ajustable en altura y profundidad (como estándar).



Rueda direccional

3 ruedas con freno individual y una rueda con bloqueo direccional para facilitar los desplazamientos en línea recta.



Asiento ajustable en altura

Ajustable en 3 posiciones, no se requieren herramientas.



Puñados ergonómicos

Para facilitar la utilización por parte del cuidador.



- Altura de asiento puede ser ajustada eléctricamente desde 500 a 1050 mm.
- La basculación del asiento es eléctrica hasta un ángulo de 35° o -5°
- Extremadamente estable incluso con basculación y elevación máximas.
- Mando para ajustes sencillo (4 botones únicamente)
- Componentes electrónicos sellados : ideal para utilización en la ducha
- Puede ser limpiada con sistemas automáticos a temperaturas de hasta 85°C!
- Batería extraíble para realizar cargas rápidamente.

La **Ocean E-Vip** está disponible en versión estándar con ruedas pequeñas. Ref. 1471208

Características y opciones



Cinturones de sujeción

Cinturón de tronco, suministrado como estándar con la silla para garantizar la seguridad. Cinturón abdominal como opción.



Rueda direccional

Una de las ruedas posteriores tiene bloqueo direccional para facilitar los desplazamientos en los pasillos de las instituciones.



Reposacabezas

Es cómodo y se puede ajustar tanto en altura como en profundidad.



Mando a distancia

Fácil utilización.

Accesorios Gama Ocean



Cojín de asiento confort

Para un mayor confort conservando el acceso para higiene.

Ocean / Ocean E-Vip 16341
Ocean Vip 1470075



Tapa confort

Compatible con el cojín confort. **Ocean / Ocean E-Vip / Ocean XL** 16343



Cojín de asiento confort con abertura oval

Ideal para pacientes de poco peso o niños.

Ocean / Ocean E-Vip / Ocean Vip 16342



Protector higiénico

Protección contra salpicaduras **Ocean / Ocean E-Vip / Ocean Vip** 16511

Accesorios Gama Ocean



Asiento confort universal
Cojín cerrado compatible con toda la familia **Ocean** 1526032



Asiento ergonómico suave
Cojín extra suave para **Ocean** y **Ocean Vip** 1531259



Barra de seguridad
Para mayor seguridad. Zona acolchada en el centro.
Ocean y **Ocean Vip** 10167-10
NC: **Ocean XL**
Largo : 540 mm
1470078 Barra XL compatible con **Ocean XL** largo 620mm



Cinturones de sujeción
Para garantizar mayor seguridad.
Cinturón pectoral 1470081
Cinturón pélvico 1470082



Dispositivo de bloqueo del reposabrazos
1470077 compatible con toda la gama **Ocean**.



Respaldo XL
Incrementa el ancho del respaldo en 80 mm.
Kit respaldo para **Ocean** 1534979



Reposabrazos anchos XL
Incrementa el ancho de los reposabrazos en 40 mm a cada lado.
Kit para **Ocean Vip** y **Ocean E-Vip** 1470086



Ruedas 24"
Kit de ruedas de 24" con freno y fijación permanente para utilizar la silla con ruedas pequeñas o ruedas grandes. Ref. 16379
Ocean y **Ocean XL**



Soporte de Amputado
Ocean 16616
Regulable de 12° a 90°
Ocean Vip - **Ocean E-Vip**
Derecho 1470827
Izquierdo 1470083



Reposapiernas
Para un soporte eficaz y adaptado de los miembros inferiores.
Ocean 16615
Regulable de 12° a 90°
Ocean Vip - **Ocean E-Vip**
Derecho 1470828
Izquierdo 1470084



Cubeta con tapa
Ocean 10230
Soporte de cubeta (no en la foto)
16335 **Ocean/Ocean XL**
1470076 **Ocean Vip**
1471233 **Ocean E-Vip**

Datos técnicos

	Ocean	Ocean 24"	Ocean XL	Ocean Vip	Ocean E Vip
Código	1534327	1534329	1534328	1470000	1471208
				1470712	
				1470713	


Características técnicas

Ancho de asiento	480mm (A)	480mm (A)	480mm (A)	500mm (A)	480mm (A)
Profundidad de asiento	450mm (B)	450mm (B)	450mm (B)	450mm (B)	450mm (B)
Altura de asiento	475-600mm (C)	475-600mm (C)	475-600mm (C)	510-610mm (C)	500-1050mm (C)
Ancho total	560mm (D)	675mm (D)	640mm (D)	595mm (D)	730mm (D)
Profundidad total	900mm (E)	1060mm (E)	900mm (E)	1060mm (E)	1010mm (E)
Altura total sin reposacabezas	940-1070mm(F)	940-1070mm(F)	940-1070mm(F)	1085-1185mm(F)	1070-1620mm(F)
Profundidad total sin reposapiés	700mm (G)	855mm (G)	700mm (G)	845mm (G)	1010mm (G)
Profundidad de la paleta	155mm (H)	155mm (H)	155mm (H)	160mm (H)	155mm (H)
Altura hasta el reposabrazos	680-850mm(I)	680-850mm (I)	680-850mm (I)	720 - 860mm(I)	730-1320mm (I)
Altura del reposapiés al asiento	255-495mm (J)	255-495mm (J)	255-495mm (J)	345-465mm (J)	345-465mm(J)
Altura del suelo a la parte más baja del asiento :	390-520mm(K)	390-520mm(K)	390-520mm(K)	420-520mm(K)	420-970mm(K)
con guías para cubeta	410-540mm(K)	410-540mm(K)	410-540mm(K)	440-540mm(K)	465-1015mm(K)
sin guías para cubeta					
Altura del asiento al reposabrazos	210 / 250mm (L)	210 / 250mm (L)	210 / 250mm (L)	215 / 245mm (L)	230 / 270mm (L)
Distancia entre reposabrazos	460mm (M)	460mm (M)	540mm (M)	475mm (M)	470mm (M)
Ancho abertura inodora	205mm	205mm	205mm	205mm	205mm
Profundidad abertura inodora	320mm	320mm	320mm	320mm	320mm
Angulo de basculación del asiento	-	-	-	0º-35º	-5º - 35º
Ruedas	5" (127mm)	24" (610mm)	5" (127mm)	5" (127mm)	5" (127mm)


Más información

Peso	14,5kg	19,5kg	14,5kg	23,5kg	39kg
Peso máx. usuario	150kg	150kg	180kg	150kg	150kg
Color	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco


Ocean

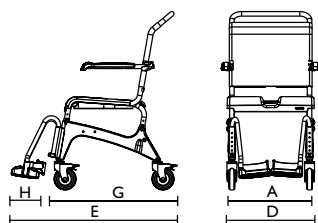


Ocean 24"

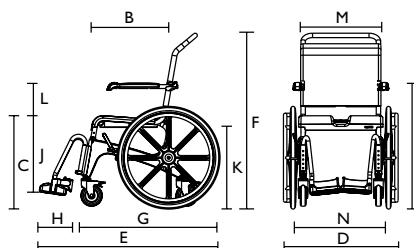

Ocean XL

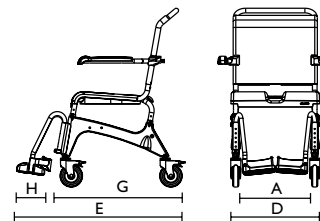

Ocean Vip

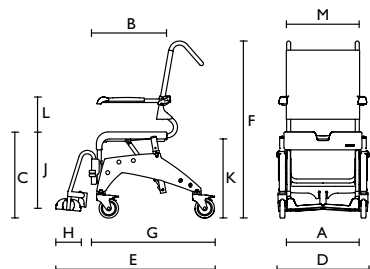

Ocean E-Vip

