


AUTOCLAVE SOBREMESA 9 LITROS

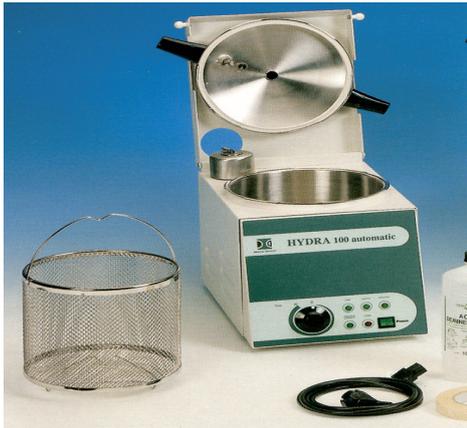

Standard Accessories: Stainless steel basket, distilled water bottle 1 l, raclair tube, electric cable, user manual in english, french, german, italian, spanish.

Technical specifications:

External size: 258x300x370mm.
 Size of the sterilizing chamber: Ø 220mm - h mm 215
 Removable basket: Ø 210mm - h mm 215
 Sterilizing liquid: distilled water
 Absorbed power: 1500 Watts
 Operating voltage: 110V or 230V - 50/60 Hz
 Fuses: type 6.3x32 mm - 8A
 Operating temperature: 125°C
 Sterilizing time: 15 minutes
 Operational pressure: 1.6/1.7 bars (170/180KPa)
 Weight net weight 12.2 kg - gross weight 14.8 kg
 Made in Italy. Warranty 1 year

EYD11104

Autoclave de sobremesa de 9 litros, a 125°C 15 minutos, con tapa superior.
 1500 W de potencia.
 Es una autoclave de fácil uso, ideal para esterilizar instrumental.

ESTERILIZADORES POR AIRE CALIENTE

Caja externa, cámara de esterilización, red, bandeja extraíble y perforada, y cubierta con asa están construidos en acero inoxidable 18/10. La cámara de esterilización y cubierta con asa aislada de la caja externa con lana de vidrio resistente a temperaturas elevadas.



Resistencias de acero inoxidable. Reloj regulable hasta 120 minutos, cuando el tiempo ha terminado el reloj apaga automáticamente el aparato. Termómetro sonda de 0 a 200°C con termostato de seguridad. Piloto rojo para indicar la alimentación y pilotos verdes para indicar que las resistencias están funcionando.

Alimentación 220v/50-60Hz.

EYD11102

Capacidad 3 litros. 270W. Dim.internas: 300x125x(h)80mm externas: 400x295x(h)170mm.

EYD11103

Capacidad 5 litros. 320W. Dim.internas: 400x160x(h)80mm externas: 500x325x(h)170mm.

TERMOSELLADORA



EYD11105

Termoselladora de control electrónico que permite termosoldar todos los materiales mixtos de papel y plástico.

La soldadura se efectúa mediante el accionamiento de la palanca ergonómica integrada dentro del perímetro del aparato. La forma es moderna y agradable, y la estructura ha sido realizada con el objetivo de colocar el portarrollos en vertical asegurando dimensiones compactas y el posicionamiento en cualquier hueco de los muebles.

La resistencia utilizada para la soldadura es de calentamiento directo, lo que evita tener que efectuar mantenimientos frecuentes.

Medidas: 540x340x(h)330mm Peso: 11kg. Consumo: 1000W
 Ancho de soldadura: 12mm. Longitud de soldadura: 300mm.
 Alimentación: 220v-50/60Hz.