



ESPECIFICACIONES STD

- Excepcional sistema de control pélvico.
- Controles en PU.
- Controles de piernas. Use uno, dos o incluso cuatro.
- Profundidad de asiento ajustable.
- Ajuste rápido y sencillo de ángulo de los reposapiés.
- Respaldo reclinable.
- Dos opciones de base distintas.
- Altura de respaldo regulable.



UNA GRAN AYUDA TERAPÉUTICA

- Disminuye la fatiga y ayuda a la actividad y a la funcionalidad.
- Facilita la digestión.
- Estimula el desarrollo de los huesos y la musculatura.
- Ayuda a la alineación neutra.
- Gracias al buen soporte, ayuda a los niños a integrarse en las actividades diarias.
- Sentarse bien ayuda a la respiración.
- Soporta la pelvis, muslos y pies, fundamentales para una buena estabilidad.
- Facilita las habilidades e integración social.



COLORES




ROJO AZUL ROSA



VERDE GRIS

JUNIOR

ACTIVIDAD E INTEGRACIÓN

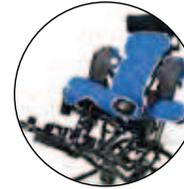

FACILIDAD PARA TRANSFERENCIAS



POSICIONAMIENTO PARA PIERNAS Y PIES



POSICIONAMIENTO PÉLVICO Y DE TRONCO



REPOSACABEZAS

Junior ofrece a los niños una amplia gama de configuraciones para estar activos e integrados con los otros niños. Su diseño único proporciona una excelente estabilidad de la pelvis, y la hondonada isquiática opcional ayuda a evitar que el niño se deslice hacia abajo en el asiento.

Junior se produce en PU, que ofrece un excelente soporte, fácil limpieza y se soluciona el problema de absorción de líquidos de otros materiales. Se puede limpiar utilizando toallitas o aerosoles antibacterianos.

Junior ofrece reclinación y basculación y tiene múltiples ajustes para acomodar a niños de diferentes tallas y proporciones. Tiene una variada gama de colores para personalizar el aspecto del Junior a su gusto. Las cubiertas son lavables, e incluye una cobertura básica de PU para usar mientras se lava la principal.

La base en Y ofrece un rango amplio y variable de altura del asiento, y el sistema hidráulico reduce el esfuerzo necesario para ajustar la altura, por lo tanto, protegen a los cuidadores al mismo tiempo que dan un adecuado soporte a los niños.



BASE X



BASE Y

CUADRO DE MEDIDAS	JUNIOR 1	JUNIOR 2	JUNIOR 3
EDAD DEL NIÑO (APROXIMADA)	18 MESES - 5 AÑOS	3-8 AÑOS	5-12 AÑOS
CARGA MÁXIMA		50 KG	
ÁNGULO DEL RESPALDO		15° / -15°	
ALTURA RESPALDO	31-41	33-43	36-46
MEDIDA BASE Y		65X78	
MEDIDAS BASE X		61X62	
ANCHO DE PECHO		18,5-28	
ANCHO CADERA		17-33	
ALTURA ASIENTO SUELO BASE Y	30,5-76	34-76	34-76
ALTURA ASIENTO SUELO BASE X		34-50	
PROFUNDIDAD ASIENTO	21-30,5	24-32	27,5-39
ALTURA DEL ASIENTO AL REPOSAPIÉS	19,5-27	25-36,5	25-40,5
ÁNGULO DE BASCULACIÓN BASE Y		30°-10°	
ÁNGULO DE BASCULACIÓN BASE X		30°-10°	