

# Relax<sup>2</sup>





## Posicionamiento, confort y adaptabilidad

### Características Standard

- Asas de empuje regulables en altura
- Respaldo ajustable en altura
- Asiento ajustable en altura y profundidad
- Asiento y respaldo con forma y soporte lateral
- Reposabrazos ajustables en altura
- Reposapiés elevables ajustables en altura
- Almohadillado del reposabrazos regulable en profundidad
- Basculación de -3 a 25°
- Reclinación del respaldo hasta 35°
- Soportes de tronco, cuña abductora y ruedas antivuelco



La configuración standard incorpora de serie además soportes de tronco, y cuña abductora

## Siéntete cómodo, siéntete Relax...

Breezy Relax<sup>2</sup> es una silla multiposición diseñada para personas que pasan largos periodos de tiempo sentados y que necesitan ante todo control postural y posicionamiento, sin renunciar por ello al confort. Con asiento y respaldo anatómico Confort y cuña abductora de serie para estabilizar la pelvis y conseguir un correcto posicionamiento de las piernas. Los reposabrazos son ajustables en altura, con almohadillado amplio para un mayor confort del usuario.

## Muy ajustable...

**Basculante desde - 3 a 25°** y con **respaldo reclinable hasta 35°**, permite al usuario cambiar de postura, y así variar las zonas del cuerpo que están sometidas continuamente a presión, reduciendo la posibilidad de escaras. Además permite regular: **la altura y profundidad** del asiento, **la altura del respaldo** (de 55 a 60 cm), y la longitud del almohadillado de los reposabrazos.



Respaldo reclinable de 0 a 35°, y basculación de -3° a 25° para alivio de presión y prevención de escaras.



Asiento regulable en profundidad desde 42 a 50 cm.



Empuñaduras ajustables en altura. Muy fáciles de ajustar para un mayor confort del cuidador.



Reposapiés elevables con plataformas regulables en ángulo y almohadilla pantorrillera amplia y confortable.



Reposacabezas acolchado, ajustable an altura, hacia delante, hacia atrás y lateralmente



Soportes de tronco regulables en ángulo, profundidad y altura. Abatibles y desmontables.

## Otras opciones y accesorios...

- Ruedas traseras de 22" macizas
- Soporte almohadilla para amputados
- Frenos de tambor
- Cinturón
- Mesa
- Reposabrazos hemipléjico
- Protector de radios

Disponible también con ruedas traseras de 16" y frenos de tambor, para ayudar al cuidador a propulsarla.





# Relax<sup>2</sup>

## Posicionamiento, confort y adaptabilidad


### Relax<sup>2</sup>:




38 / 43 / 48 cm




41,5 - 50 cm  
(según modelo)

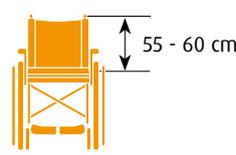

AA + 20 cm

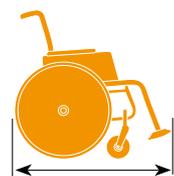


99 cm (16")  
111 cm (24")

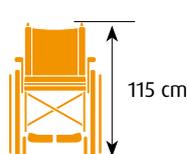

115 cm



De 0° a 25°  
De -3° a 22°

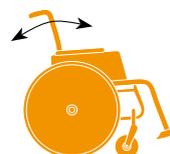

0° - 35°

### Especificaciones técnicas

Anchura de asiento:	38, 43, 48 cm	Reclinación:	35°
Profundidad de asiento:	De 42 a 50 cm	Color de armazón:	Gris plata
Altura de asiento:	De 41,5 a 50 cm (según modelo)	Altura de los reposabrazos:	De 20 a 33 cm
Altura de respaldo:	55 cm (ajustable a 57,5 y 60 cm)	Peso máximo de usuario:	145 kg
Anchura total:	Ancho de asiento + 20 cm	Peso máx.:	desde 34 kg
Anchura total con frenos de tambor:	Ancho asiento + 22 cm	Peso de la parte mínima más pesada:	18kg
Longitud total:	99 cm (con 16"), 111 cm (con 24")	Pendiente máx. de seguridad (con antivuelcos):	10°
Basculación:	0° a 25° / -3° a 22°	Radio de giro:	desde 86 cm

Tolerancia de Fábrica: +/- 1 cm

Para ampliar información sobre opciones y disponibilidad por favor consulte la hoja de pedido.

Nuestros productos están en constante proceso de mejora, por lo que Sunrise Medical se reserva el derecho de cambiar el diseño de los mismos y las especificaciones indicadas sin previo aviso



**Sunrise Medical S.L**  
Polígono Bakiola, 41  
48498 Arrankudiaga  
Vizcaya, España

Tel: 902 14 24 34  
Fax: 94 648 15 75

www.SunriseMedical.es