



heronTM


Heron es uno de los asientos para baño y aseo más extraordinarios del mercado. Su diseño sencillo y limpia apariencia ocultan múltiples características funcionales que mejoran la experiencia del baño tanto del usuario como del cuidador.



Heron establece nuevos parámetros para usuarios con necesidades especiales de posicionamiento. El asiento es dinámico, lo que significa que puede bascular y reclinar el respaldo sin comprometer la postura adecuada del usuario. Diseño inteligente significa que al reclinar el respaldo se mantiene el punto de pivote (asiento-respaldo) en relación al eje anatómico de las caderas. Esto proporciona al usuario un mayor confort y una mejor sedestación.


Heron puede utilizarse de forma independiente con una cubeta orinal, directamente sobre el inodoro o bien como silla de baño para la ducha. El suave sistema de regulación de altura, basculación y reclinación aseguran unas condiciones óptimas de trabajo para el cuidador. Para obtener aún mayor seguridad, Heron está equipada con cuatro ruedas con freno y bloqueo.

Heron se distribuye con un respaldo estrecho para facilitar la libertad de movimientos. Para conseguir un soporte y confort adicionales, Heron permite la instalación de controles de tronco pivotantes y de soportes laterales acolchados para los hombros. Heron se distribuye en una única talla.

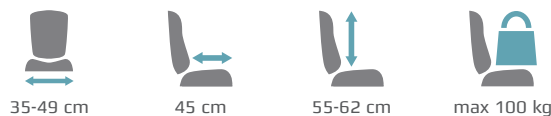

Fácilmente adaptable a las condiciones de trabajo

El sistema hidráulico de regulación de altura permite ajustar la altura de Heron entre 51 cm y 78 cm. La regulación de la altura facilita la transferencia del niño a la silla o fuera de ella y proporciona unas óptimas condiciones de trabajo al cuidador.

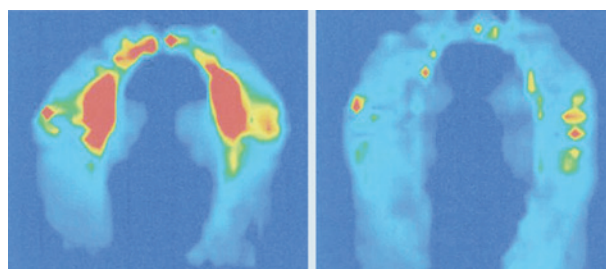

Asiento confortable

Hemos utilizado un mapa de presiones en el diseño de Heron para minimizar la presión y proporcionar mayor confort al usuario, incluso cuando se utiliza la silla durante un prolongado periodo de tiempo.



Óptimo posicionamiento

Heron cuenta con unas manetas para graduar la basculación y la reclinación fácilmente accesibles, funciones que permiten un óptimo y estable posicionamiento. El rango de basculación del asiento y reclinación del respaldo va de -5° a 25°.



Sujeción completa mientras está sentado

Heron puede adaptarse en un amplio abanico de posibilidades para obtener un soporte postural específico para el usuario con una mínima intervención o bien, si fuera necesario, un soporte total. Reposacabezas, soportes de cadera multiajustables, controles de tronco pivotantes, reposabrazos y mesa están incluidos en una completa gama de accesorios.



Tallas

880505-01

Heron está disponible en una única talla



Manetas fácilmente accesibles

Las manetas han sido diseñadas ergonómicamente y son fácilmente accesibles, con ellas podemos controlar las funciones de basculación y reclinación del respaldo



Desbloqueado

Bloqueado

Ruedas lisas

Las ruedas lisas grandes proporcionan a Heron maniobrabilidad y facilidad de manejo, especialmente en suelos de baño alicatados. Todas las ruedas tienen frenos y sistemas de bloqueo para una segura y estable transferencia



Desbloqueado

Bloqueado

Acolchado suave y redondeado

El acolchado de Heron ha sido seleccionado para proporcionar un máximo confort, gracias a que contribuye a compensar la temperatura y minimiza la presión.



Una infinidad de posibilidades


Heron puede utilizarse directamente sobre el inodoro, también puede utilizarse de forma independiente añadiéndole una cubeta orinal o bien como silla de baño para la ducha, e incluso reclinarsse sobre la bañera, por ejemplo para lavar el pelo



Directamente sobre el inodoro (estándar)

De forma independiente con una cubeta orinal (accesorio)

Silla de baño

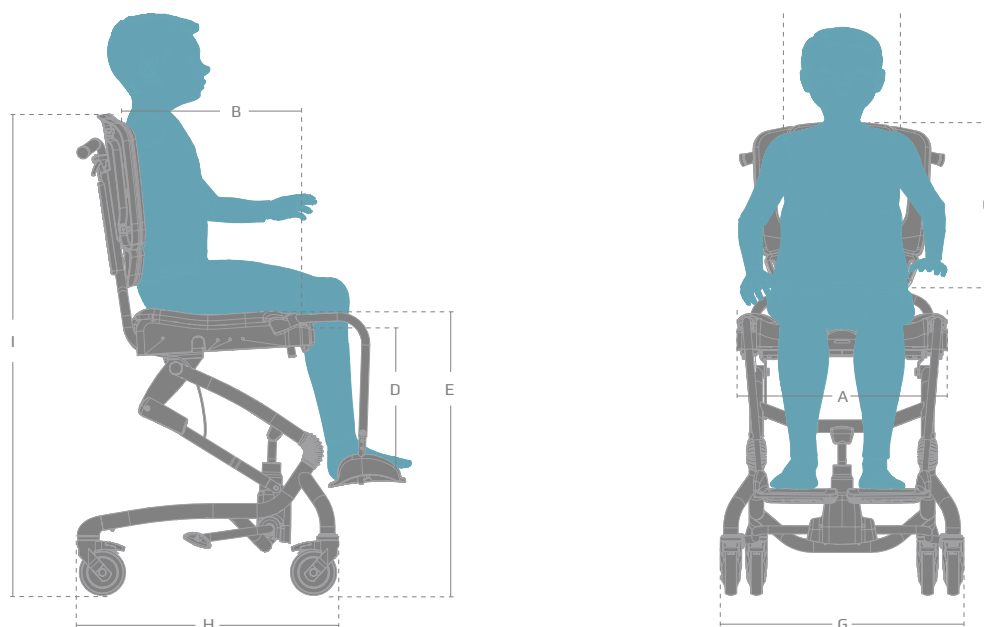

Medidas

	Talla única
Ancho del asiento (A)	55 cm (21½")
Seat width with hip supports (accessories)	35 - 49 cm (13½" - 19")
Profundidad del asiento (B)	45 cm (17½")
Anchura del respaldo (F)	29 cm (11¼")
Anchura del respaldo (C)	55 - 62 cm (21½" - 24¼")
Altura del asiento desde el suelo (E)	51 - 78 cm (20" - 30½")
Ancho del chasis (G)	67 cm (26")
Longitud (H)	71 cm (27¾")
Altura del chasis con asiento (I)	108 - 135 cm (42" - 52½")
Basculación del asiento	-5° -> 25° (-5° -> 25°)
Ángulo del respaldo	0° -> 30° (0° -> 30°)
Peso	28 kg (61.5 lb)
Carga máxima	100 kg (220 lb)



ACCESORIOS



Reposacabezas

Para alinear y sujetar la cabeza en posición inclinada.

Véase la sección de accesorios al final del catálogo para más información sobre opciones y medidas



Soportes laterales para hombros

880508-01. Proporcionan estabilidad para la cintura escapular y moderado control de la posición del tronco.

Talla	medidas
Única	W:10 x H:36 cm
48 cm	Anchura del respaldo en la parte superior:



Acolchados para soportes laterales hombros

880507-04
Para un confort adicional

Talla	medidas
Única	W:10 x H:36 cm



Controles de tronco pivotantes

83xxx-xxx Permiten un posicionamiento preciso del tronco.

Véase la sección de accesorios al final del catálogo para más información sobre opciones y medidas



Reposabrazos

880508-03
Los reposabrazos pueden ayudar al niño a recolocarse y en el momento de la transferencia.

Talla	medidas
Única	W:5 x L:37 x H:25 cm
H:	altura en la parte superior del asiento



Mesa

880508-04 La mesa puede ser usada como soporte para obtener una posición de aseo más natural, para usuarios con deficiencias para el control superior del tronco o de control de cabeza.

Talla	medidas
Única	W:44 x D:19 cm



Soportes de cadera

880508-02
Para soporte pélvico y ajuste de la anchura del asiento.

Talla	medidas
Única	W:21 x H:10 cm
Anchura del asiento:	35 - 49 cm



Cubeta orinal

880130
La cubeta orinal hace posible utilizar Heron como un asiento de inodoro independiente.

Talla	medidas
Única	W:20 x D:34 x H:12,5 cm



Protección contra salpicaduras

880508-05
Además de su función natural, es ideal para mantener la alineación de las piernas o la gestión de aducción.

Talla	medidas
Única	W:8 x H:13,5 cm



Acolchados

880507-01, kit completo
880507-02, respaldo
880507-03, asiento

Talla única



Chalecos y cinturones

Para un soporte y un posicionamiento correctos.

Véase la sección de accesorios al final del catálogo para más información sobre opciones y medidas



Reposapiés con barra de sujeción en ángulo recto desde las rodillas

880506-01
Para el posicionamiento de las piernas

Talla única	medidas
Longitud tibial	36 - 46 cm

ACCESORIOS



Reposapiés con barra de sujeción en ángulo abierto desde las rodillas

880506-02 Para el posicionamiento de las piernas

Talla única
Longitud tibial 36 – 46 cm



Acolchado para reposapiés

880506-12 Protección para las rodillas de usuarios sentados en abducción o en riesgo de sufrir daños por golpear con el chasis al extender la rodilla.

Talla única



Soporte para la pantorrilla

880509-01
Soporte pantorrilla

Talla medidas
Única H:10 cm
H altura de la cinta



Taloneras

880509-02
Para un correcto posicionamiento del pie.

Talla medidas
Única H:4 cm – H1: 5 cm
H altura de la cinta
H1 altura desde la plataforma del reposapiés

