



Madagaskar

Scooter grande
con amortiguaciones

FICHA TÉCNICA

más de 50 años viviendo sin límites

! Nota importante

Las características técnicas indicadas son orientativas, ya que pueden presentar cambios de diseño según las necesidades de fabricación.

El producto del presente catálogo no necesariamente ha sido fotografiado en su configuración estándar.

Consultar nuestra página web para ver el modelo actualizado.

TotalCare Europe

(+34) 935 942 066

info@totalcare-europe.com

C / Amsterdam 1-3, 08191 Rubí, España

www.totalcare-europe.com

FICHA TÉCNICA

MADAGASKAR



SCOOTER GRANDE CON AMORTIGUACIONES Y PANTALLA DE 7"

El scooter Madagaskar destaca por su diseño elegante y su excepcional rendimiento.

Con un potente motor de 500W y cuatro baterías de gel de 20 Ah, ofrece una experiencia de conducción incomparable, con una autonomía de 25 a 30 km y una velocidad máxima de 15 km/h. Su sistema de amortiguación en las cuatro ruedas garantiza una conducción suave y segura.

La pantalla táctil de 7 pulgadas proporciona información esencial como velocidad, capacidad de la batería y trayecto recorrido. Además, su avanzado sistema de altavoces integrado permite disfrutar de música, con conectividad bluetooth y radio incorporada.

Equipado con un completo sistema de luces LED y un asiento acolchado regulable en profundidad con respaldo reclinable.

INFORMACIÓN GENERAL

Medidas

Ancho total	63 cm
Profundidad total	136 cm
Alto total	150 cm
Alto del asiento al suelo	65 cm

Peso


Peso total	90 kg
Peso máximo soportado	120 kg

Material	Aluminio
----------	----------

Color	Rojo
-------	------

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Asiento	
Ancho del asiento	50 cm
Profundidad del asiento	40 cm
Tipo de asiento	Regulable en profundidad
Motor	
Motor	500 W
Batería	4 x 20 Ah (gel)
Número de baterías	4
Autonomía	25 - 30 km
Velocidad máxima	15 km/h
Cargador externo	20 Ah
Tiempo de carga	±8 horas
Reposabrazos	
Largo del reposabrazos	32 cm
Ancho del reposabrazos	8 cm
Tipo de reposabrazos	Abatibles y regulables en inclinación
Respaldo	
Ancho del respaldo	46 cm
Alto del respaldo con reposacabezas (regulable)	72 a 77 cm
Tipo del respaldo	Reclinable
Ruedas	
Medidas ruedas	Ø 32 cm
Ancho ruedas	10 cm
Tipo de ruedas	Hinchables / Macizas
Tecnología	
Bluetooth	Sí
Pantalla LED	7"
Radio	Sí
Sistema de altavoces	Sí
Otras características	
Altura hasta la parte superior de la plataforma	20 cm
Altura máxima bordillos	16 cm
Amortiguación	4 ruedas
Claxon	Sí
Luces delanteras, traseras e intermitentes	Sí
Máxima pendiente de escalada	20°
Parachoques	Delantero y trasero
Radio de giro	200 cm
Ruedas antivuelco	Sí
Tipo de frenos	Electromagnéticos

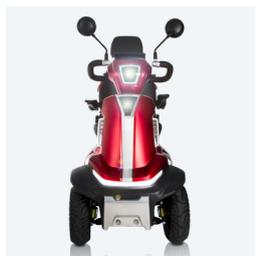

ELEVE SU EXPERIENCIA DE CONDUCCIÓN CON EL SCOOTER DE ÚLTIMA GENERACIÓN

PANTALLA TÁCTIL, SISTEMA DE SONIDO Y SEGURIDAD AVANZADA



PANTALLA LED DE 7 PULGADAS



Una característica destacada del scooter Madagascar es su innovadora **pantalla táctil de 7 pulgadas**, que brinda al usuario información de interés sobre el rendimiento del scooter, como la velocidad, la capacidad de la batería y el trayecto recorrido.

MANDO DE CONTROL REMOTO



Ofrece un **mando de control remoto bluetooth** que permite gestionar el scooter de forma conveniente a distancia. Encienda y apague el scooter sin necesidad de insertar la llave en el contacto, además de activar y desactivar la alarma del sistema antirrobo con facilidad.

SISTEMA DE SONIDO INTEGRADO



Incorpora un avanzado **sistema de altavoces integrados**, permitiendo a los usuarios disfrutar de su música favorita. Conecte fácilmente sus dispositivos móviles a través de bluetooth o sintonice la radio. Desde la pantalla LED, controle la música: cambie de canción, ajuste el volumen y sintonice sus emisoras preferidas.

SISTEMA ANTIRROBO



El scooter Madagascar ofrece la opción de activar un eficiente **sistema antirrobo**. Una vez activada la alarma, si el vehículo está apagado y detecta movimiento, la alarma se activará con un sonido potente y persistente hasta que se desactive correctamente o se detenga la manipulación no autorizada.



TOMA DE CARGA USB

Está equipado con una práctica **toma de carga USB**, permitiéndole mantener su teléfono móvil cargado mientras se desplaza.

Además, cuenta con un compartimento dedicado para que pueda dejar su dispositivo mientras se carga, manteniéndolo accesible en todo momento.

SIENTA LA LIBERTAD Y ELEGANCIA
CON EL NUEVO SCOOTER MADAGASKAR

DISEÑADO PARA IMPRESIONAR, CREADO PARA SU COMODIDAD

PANTALLA LED DE 7 PULGADAS

Una característica destacada del scooter Madagascar es su innovadora pantalla táctil de 7 pulgadas, que brinda al usuario información de interés sobre el rendimiento del scooter, como la velocidad, la capacidad de la batería y el trayecto recorrido.



SISTEMA DE ILUMINACIÓN AVANZADO

Cuenta con un sistema de luces LED completo, que incluye luces de posición, luces cortas y largas, así como intermitentes y luces de emergencia para una visibilidad óptima en cualquier situación.



REPOSABRAZOS REGULABLES

Introducimos un nuevo sistema de reposabrazos regulables en inclinación.



ASIENTO Y RESPALDO AJUSTABLES PARA LA MÁXIMA COMODIDAD

El Madagascar ofrece un asiento excepcionalmente cómodo gracias a su acolchado y respaldo que abraza la espalda para brindar comodidad superior. Además, se adapta a las necesidades del usuario, ya que es regulable en profundidad y permite inclinar el respaldo.



GUARDAOBJETOS DISEÑADOS PARA SU COMODIDAD

El scooter Madagascar, pensando en la practicidad del usuario, ofrece numerosos compartimentos diseñados estratégicamente para guardar objetos. Con cajones laterales y frontales, así como redes para documentos y llaves, encontrará el espacio perfecto para sus pertenencias.



AMORTIGUACIONES EN LAS 4 RUEDAS

El scooter Madagascar dispone de amortiguaciones en las 4 ruedas, ofreciendo una mejor experiencia de conducción y con una mayor absorción de impactos y mejor estabilidad.



PARACHOQUES ROBUSTO Y RESISTENTE

Incorpora un parachoques robusto y resistente para brindar una mayor seguridad y protección del chasis del scooter de manera efectiva.

