



Fabricado en  
fibra de carbono



ULTRALIGERO  
TAN SOLO 5,50 KG

**MAGNUM**  
**CARBON**



## Magnum Carbon

Andador de exterior  
de fibra de carbono

**FICHA TÉCNICA**

más de 50 años viviendo sin límites

**!** Nota importante

Las características técnicas indicadas son orientativas, ya que pueden presentar cambios de diseño según las necesidades de fabricación.

El producto del presente catálogo no necesariamente ha sido fotografiado en su configuración estándar.

Consultar nuestra página web para ver el modelo actualizado.

**TotalCare Europe**

(+34) 935 942 066

info@totalcare-europe.com

C / Amsterdam 1-3, 08191 Rubí, España

[www.totalcare-europe.com](http://www.totalcare-europe.com)

## FICHA TÉCNICA

# MAGNUM CARBON



**CAMINE  
CON ESTILO,  
COMODIDAD Y  
SEGURIDAD**



### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

#### Asiento

Ancho del asiento (talla)	45 cm
Ancho útil para sentarse	48 cm
Profundidad del asiento	20 cm
Tipo de asiento	Plegable
Material del asiento	PVC

#### Respaldo

Ancho del respaldo	48 cm
Alto del respaldo	16 cm
Tipo de respaldo	Extraíble

#### Ruedas



Medidas ruedas	Ø20 cm
Ancho ruedas	3 cm
Tipo de ruedas	Macizas

#### Cesta

Medidas (ancho x alto x profundidad)	38 x 12 x 25 cm
Capacidad	11,4 L
Peso máximo soportado cesta	5 kg
Tipo de cesta	Extraíble y lavable

#### Otras características

Tipo de freno	Freno maneta / Freno bloqueo
Tipo de plegado	Paralelo con cruceta

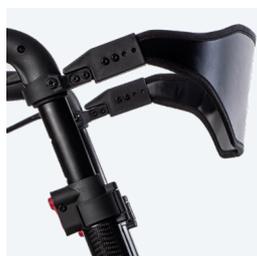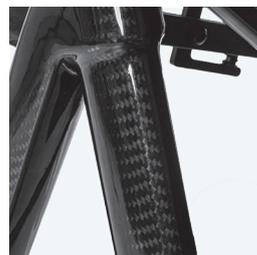

### ANDADOR DE EXTERIOR FABRICADO EN FIBRA DE CARBONO

El andador Magnum Carbon, fabricado al 100% en fibra de carbono, se posiciona como el andador de exterior más ligero del mercado, con un peso de tan solo 5,50 kg. Su fibra de carbono de alta calidad y sus acabados y tejidos de lujo lo convierten en un producto de altísima calidad.

Además de ser ligero, es muy resistente, soportando hasta 136 kg. Sus medidas compactas lo hacen ideal tanto para uso en interiores como en exteriores. Cuenta con una cesta extraíble de más de 11 litros de capacidad, perfecta para realizar pequeñas compras.

Con su robustez, diseño y comodidad, el andador Magnum Carbon destaca como el andador de moda, deseado por todos.

### INFORMACIÓN GENERAL

#### Medidas

Ancho total	64 cm
Ancho entre ruedas traseras	49 cm
Profundidad total	68 cm
Alto total (regulable)	83 - 96 cm
Alto del asiento al suelo	60 cm

#### Medidas plegado

Ancho plegado	18 cm
Profundidad plegado	68 cm
Alto plegado	85 cm

#### Peso

Peso total	5,50 kg
Peso máximo soportado	136 kg

Material	Fibra de carbono
----------	------------------



## MAGNUM CARBON: LA ÚLTIMA TENDENCIA EN MOVILIDAD



### FABRICADO EN FIBRA DE CARBONO

El Magnum Carbon **fabricado en fibra de carbono**, un material excepcionalmente **ligero y robusto**. Ofrece una apariencia elegante y moderna.

La fibra de carbono, no solo garantiza una conducción del andador suave y cómoda, sino que también absorbe eficazmente los impactos, proporcionando una experiencia de usuario confortable y segura.

Además, su **resistencia** a la corrosión y durabilidad aseguran una vida útil prolongada, convirtiéndola en una opción incomparable para aquellos que buscan lo mejor.



### FÁCIL ALMACENAMIENTO ANDADOR PLEGABLE

El plegado del Magnum Carbon es rápido y sencillo, reduciéndolo a un tamaño compacto de **18 cm de ancho y 85 cm de alto**. Esto lo hace perfecto para almacenar en espacios reducidos o en el maletero. Su peso ultraligero facilita aún más su transporte.



### INCREÍBLEMENTE LIGERO 5,5 KG

Fabricado con fibra de carbono de alta resistencia y materiales de excelente calidad, el Magnum Carbon combina un peso **ultraligero de solo 5,50 kg**, incluyendo el respaldo y la cesta, con una impresionante capacidad de carga de hasta **136 kg**.



### COMPACTO Y PRÁCTICO MEDIDAS REDUCIDAS

El Magnum Carbon es ideal para la movilidad en espacios reducidos gracias a sus **dimensiones compactas (64 cm de ancho y 68 cm de profundidad)**. Esto asegura una circulación fluida en áreas estrechas tanto en interiores como en exteriores.

SIENTA LA LIBERTAD Y ELEGANCIA

# DISFRUTE DEL ANDADOR MAGNUM CARBON, EL MÁS LIGERO Y EXCLUSIVO



## FRENO MANETA

El andador Magnum Carbon está equipado con un sistema de freno de maneta, que puede bloquearse tirando de la maneta.



## RESPALDO

El respaldo del andador Magnum Carbon se puede extraer de manera fácil y rápida.



## ALTURA REGULABLE

La altura de los puños se puede ajustar mediante un sistema de liberación rápida. Regulable en 4 niveles, este andador es adecuado para usuarios con una estatura de 150 a 185 cm.



## BLOQUEO DE PLEGADO

El andador dispone de una hebilla para plegarlo y desplegarlo de manera segura. Además, cuenta con un sistema de bloqueo que asegura el plegado.



## SISTEMA DE FRENO SIN CABLES

El innovador sistema de freno sin cables optimiza el plegado y evita que los cables molesten. Freno de maneta y freno de bloqueo.



## CESTA EXTRAÍBLE

La cesta extraíble mide 38 cm de ancho, 12 cm de alto y 25 cm de profundidad, con una capacidad de 11,4 litros y un peso soportado de 5 kg. Cuenta con un sistema de clips que permite extraerla de manera rápida y cómoda.