



**Scooter con
plegado electrónico**

SCOOTER DE ÚLTIMA GENERACIÓN
CON AMORTIGUACIONES Y LUCES

LANZAROTE



Lanzarote

Scooter con
plegado electrónico

FICHA TÉCNICA

más de 50 años viviendo sin límites

! Nota importante

Las características técnicas indicadas son orientativas, ya que pueden presentar cambios de diseño según las necesidades de fabricación.

El producto del presente catálogo no necesariamente ha sido fotografiado en su configuración estándar.

Consultar nuestra página web para ver el modelo actualizado.

TotalCare Europe

(+34) 935 942 066

info@totalcare-europe.com

C / Amsterdam 1-3, 08191 Rubí, España

www.totalcare-europe.com

FICHA TÉCNICA

Lanzarote



SCOOTER ELÉCTRICO CON PLEGADO ELECTRÓNICO Y AMORTIGUACIONES

El scooter Lanzarote se distingue por su diseño ultracompacto y su tecnología de última generación. Con tan solo 98 cm de largo y 47 cm de ancho, es ideal para maniobrar en espacios reducidos.

Gracias a su sistema de plegado electrónico, el scooter puede cerrarse cómodamente desde el joystick o mediante el mando bluetooth, sin esfuerzo.

Con un peso de solo 25,5 kg sin batería, es sorprendentemente ligero y, al plegarse, adquiere un tamaño similar al de una maleta, lo que lo convierte en una opción perfecta para almacenar o transportar.

Además, cuenta con un avanzado sistema de amortiguación que garantiza una conducción suave, y un moderno conjunto de luces LED, que mejoran tanto la visibilidad como la seguridad.

INFORMACIÓN GENERAL

Medidas

Ancho total	56 cm
Ancho total (sin reposabrazos)	47 cm
Profundidad total	98 cm
Alto total	88 cm
Alto del asiento al suelo	53 cm

Medidas plegado

Ancho plegado (sin reposabrazos)	47 cm
Profundidad plegado	40 cm
Alto plegado	65 cm

Peso

Peso total (sin batería)	25,5 kg
Peso total (con batería de 16 Ah)	27,5 kg
Peso máximo soportado	125 kg

Material

Aluminio

Color

Gris mate

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Asiento

Ancho del asiento	42 cm
Ancho útil para sentarse (entre reposabrazos)	46 cm
Profundidad del asiento	40 cm

Motor

Motor	120 W
Batería	16 Ah (litio)
Número de baterías	1
Autonomía	15 - 20 km
Velocidad máxima	6 km/h

Reposabrazos

Largo del reposabrazos	25 cm
Ancho del reposabrazos	5 cm
Tipo de reposabrazos	Abatibles / Extraíbles

Respaldo

Ancho del respaldo	40 cm
Alto del respaldo	24 cm
Tipo del respaldo	Plegable

Ruedas

Medidas ruedas delanteras	Ø 17 cm
Medidas ruedas traseras	Ø 17 cm
Ancho ruedas delanteras	4 cm
Ancho ruedas traseras	6 cm
Tipo de ruedas	Macizas

Otras características

Altura máxima bordillos	5 cm
Altura del suelo a la parte inferior de la plataforma	9 cm
Amortiguación	Sí
Claxon	Sí
Conexión USB	Sí
Luces LED	Sí
Mástil	Regulable en altura e inclinación
Máxima pendiente de escalada	12°
Radio de giro	140 cm
Ruedas antivuelco	Sí
Tipo de frenos	Electromagnéticos
Tipo de plegado	Electrónico desde el panel o mando, con opción de plegado manual de emergencia



SIENTA LA LIBERTAD Y ELEGANCIA

**LIGERO, COMPACTO Y
PLEGABLE PARA UNA
MOVILIDAD SIN LÍMITES**

lanzarote



PLEGADO ELECTRÓNICO
DESDE EL PANEL O MANDO BLUETOOTH




El scooter Lanzaote incorpora tecnología de última generación, como su sistema de **plegado electrónico**. Puede plegarse fácilmente desde el panel de control o mediante el mando bluetooth, completando el proceso en tan solo 5 segundos. Además, cuenta con un modo de **plegado manual de emergencia** en caso de que se agote la batería.

SUPERCORTO
TAN SOLO 98 CM DE PROFUNDIDAD



Además de ser ligero pesando tan solo 25,5 kg sin batería, el scooter Lanzaote es también extremadamente compacto. Con una **profundidad de 98 cm**, es uno de los scooters más cortos del mercado. Esta longitud le permite ser muy versátil en espacios reducidos, como ascensores pequeños. Su **ancho total de 56 cm**, lo hace ideal para pasar por puertas y maniobrar en espacios limitados.

PLEGADO COMPACTO Y CON RUEDA DE TRANSPORTE

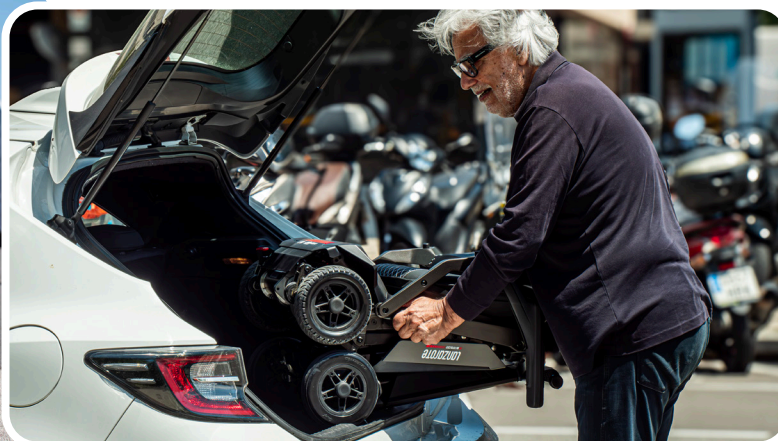

Gracias a su peso ultraligero y diseño supercompacto, el scooter Lanzaote es totalmente plegable, alcanzando unas dimensiones reducidas de **47 x 40 x 65 cm** (ancho x profundidad x alto), similares a las de una maleta. Además, incorpora ruedas de transporte, lo que permite arrastrarlo cómodamente como si fuera un equipaje de mano.

ELEVE SU EXPERIENCIA DE CONDUCCIÓN
CON EL SCOOTER DE ÚLTIMA GENERACIÓN

lanzarote

PANTALLA, AMORTIGUACIÓN, LUCES LED Y PLEGADO ELECTRÓNICO



LUZ FRONTAL

Luz LED delantera controlable desde el panel de control.



PANEL DE CONTROL Y PANTALLA TFT

El panel incorpora una pantalla TFT que muestra el nivel de batería, velocidad y distancia recorrida. También permite la carga del scooter y cuenta con USB.



REPOSABRAZOS EXTRAÍBLES

Los reposabrazos del scooter Lanzarote son abatibles y fácilmente desmontables para mayor comodidad y accesibilidad.



MÁSTIL REGULABLE EN ALTURA

El mástil es ajustable en altura, permitiendo encogerlo al máximo para optimizar el plegado del scooter.



SISTEMA DE PLEGADO MANUAL

En caso de que el scooter se quede sin batería, puede plegarse manualmente para situaciones puntuales.



MÁSTIL REGULABLE EN INCLINACIÓN

El mástil es regulable en inclinación y el mismo pistón permite abatirlo completamente.



CARGA TRASERA

Toma de carga ubicada en la parte trasera del scooter.



BATERÍA DE FÁCIL EXTRACCIÓN

Equipado con una batería de litio de 16 Ah, fácilmente extraíble gracias a un sistema rápido.



PALANCA DE DESCONEXIÓN DEL MOTOR

El motor de 120W cuenta con una palanca que permite su desconexión. Al liberar el motor, el scooter puede desplazarse sin resistencia alguna.



AMORTIGUACIÓN

El scooter Lanzarote incorpora amortiguaciones traseras que proporcionan una conducción más suave y cómoda.