



# Silla Yeti

Sillas PCI Pediátricas



# Silla Yeti

## Sillas PCI Pediátricas

La Silla Yeti, es la de mayor tamaño de su gama. Ideal para usuarios de entre 130 - 175 cm de altura y un peso máximo de 75 kg. Robusta y ligera proporciona una gran comodidad y seguridad. Su gran variedad de ajustes le permiten satisfacer cualquier necesidad del niño.

- Permite la **configuración del asiento** por completo: Respaldo reclinable y ajustable en altura y posibilidad de elegir la firmeza del mismo.
- **Sistema Crece Contigo**, almohadillas ajustables que permiten adaptarse al crecimiento del niño modificando la profundidad del asiento y la altura del respaldo.
- **Sistema de basculación** del asiento junto con el respaldo que facilita una posición más segura y ergonómica durante la marcha.
- **Ruedas de gel con amortiguación**, freno central y bloqueo direccional de ruedas garantizan un rendimiento perfecto.
- **Pedal de elevación** de la silla que facilita salvar obstáculos.
- Incorpora un **sistema de protección** con extensiones laterales que protege al niño.
- **Asiento desmontable y estructura plegable** que facilita su almacenamiento.
- **Kit de transporte** que permite llevar la silla con el niño en un vehículo adaptado.

Disponible en color gris .

## Elementos destacados:




Controles de cabeza, tronco y pelvis



Visera con ventanilla



Cinturón de seguridad

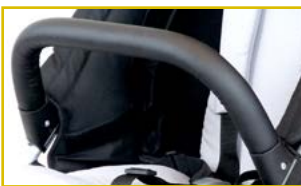

Barrera de seguridad



Respaldo y asiento ajustables y reclinables



Kit de transporte



Ruedas traseras con amortiguación



Reposapiés plegable y ajustable en altura



Estructura plegable





## Accesorios de serie:



Apoyos laterales para cabeza



Apoyos laterales para tronco



Taco abductor



Cinturón de 5 puntos



Arnés pélvico



Reposapiés con cinchas



Mesa



Capota



Barra de seguridad



Guantes



Sombrilla



Saco de dormir



Cesta



Bolsa para manillar



Protector para lluvia



Mosquitera



Descripción de producto	Referencia
Silla Yeti	0431004
Dimensiones de la caja (largo x ancho x alto)	66 x 50 x 114 cm
Peso total de la caja	30 kg
Especificaciones técnicas	
Dimensiones (largo x ancho x alto)	114,5-146 x 66 x 117-138 cm
Dimensiones plegada (largo x ancho x alto)	110 x 66 x 50 cm
eso sin accesorios/con accesorios	24 kg – 28,6 kg
Altura del niño	130 - 175 cm
Peso máximo soportado	80 kg
Anchura del asiento	28 - 43 cm
Profundidad del asiento	31 - 45 cm
Altura del respaldo	65 - 85 cm
Ajuste del reposapiés	28,5 – 43,5 cm / 7 posiciones
Asiento extraíble	No
Basculante	Sí
Sistema «Crece contigo»	Sí
Asiento marcha/contramarcha	No
Garantía	
Silla	2 años



**APEX**  
Wellell Group

APEX MEDICAL, S.L.  
c/ Elcano, 9, 6ª planta  
48008 Bilbao (Vizcaya)  
Tel: 94.470.64.08  
info@apexmedical.es  
www.apexmedicalcorp.com