Obi

Silla de paseo plegable





- Chasis plegable de acero y aluminio. Pintura epoxi no tóxica.
- Cojín extraíble, tapizado con tela de microfibra de trevira ignífuga, puede lavarse a máquina a 30°. Colores resistentes.
- Armazón de nylon cordura Dupont, de aspecto natural, resistente al uso prolongado. Puede lavarse con agua.
- Respaldo rígido, reclinable en cuatro posiciones con un simple bloqueo a presión.
- Asiento rígido fijo.
- Reposapiés elevable con bloqueo rápido.



Referencia	Ancho asiento	Profundidad asiento	Altura respaldo	Ancho total	Peso	Carga máx.
OBI 2	33 cm	30 cm	62 cm	60 cm	17,4 kg	50 kg
OBI 3	37 cm	36 cm	68 cm	62,5 cm	18,5 kg	60 kg
OBI 4	41 cm	40 cm	76 cm	66,5 cm	20,1 kg	70 kg

Asegúrese de que sus medidas entran en el rango de centímetros indicados

características

Obi

Silla de paseo plegable



- 1 Ranuras para el cabezal
- 2 Ranuras para la correa con tirantes
- 3 Bordes laterales de protección en el chasis
- 4 Correa abdominal; accesorio
- **5 -** Ranura para la introducción del **abductor**
- 6 Regulación a presión para la altura del reposapiés
- 7 Reposapiés abatible con refuerzo
- **8 Ruedas delanteras** antiperforación de 17 cm pivotantes, con cojinetes de bolas
- **9 Ruedas traseras** neumáticas de 30 cm, deslizables sobre cojinetes de bolas. Bajo pedido se pueden suministrar ruedas macizas.
- **10 Frenos independientes**, ligeros para el accionamiento y sólidos en su funcionamiento
- 11 Bloqueo cierre del chasis



accesorios

• • • • • • •

• • • • • • • • •



Accesorio Ref.: 812 Bloqueo direccional de ruedas delanteras.



Accesorio Ref.: 816 Controles laterales.




Accesorio Ref.: 817 Cintas inguinales.



Accesorio Ref.: 818 Funda térmica.



Accesorio Ref.: 819 Capota.

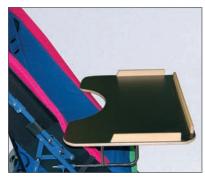


Accesorio Ref.: 824 Mesa con hueco.

accesorios



Accesorio Ref.: 825 Funda de lluvia. Montar solo después de colocar la capota 819.

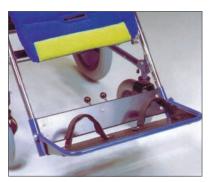

Accesorio Ref.: 827 Correas reposapiés.



Accesorio Ref.: 828 Correa abdominal.



Accesorio Ref.: 834 Abductor acolchado.



Accesorio Ref.: 835 Cabezal con protecciones parietales. Dos elementos laterales. Se pueden utilizar individualmente, derecha o izquierda.



Accesorio Ref.: 837 Mesa normal.



Accesorio Ref.: 839 Barra de apoyo frontal.



Accesorio Ref.: 853 Tirantes de 4 puntos.



Accesorio Ref.: 858 Cesta de red.



Accesorio Ref.: 894 Correa pélvica a 45°.



Accesorio Ref.: 891 Cuatro anillos de anclaje. Para el transporte en vehículos, en dirección al sentido de la marcha. Coches, autobuses, etc.






Obi ha superado el CRASH TEST en conformidad con la norma ISO 7176/19


Atención:


- Aptas para cinturones de 4 puntos de sujeción homologados norma ISO 10542 suministrados con el vehículo.
- -El niño debe usar un cinturón pélvico y un cinturón torácico homologados norma ISO 7176-19 ó ISO 10542. Los cinturones posturales como los 828, 853, 894, 903, 906 no están homologados para el uso como sistemas de sujeción.
- -El vehículo debe ser apto para el transporte de sillas de paseo ortopédicas según las leyes vigentes.
- Leer las advertencias y las instrucciones del manual de uso y mantenimiento provisto con la silla de paseo.

Producto marcado CE - Producto testado CERAH FRANCIA


Obi 2 Peso 17,4 kg Carga máx. 50 kg

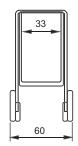


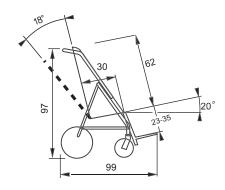


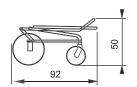


Obi 3 Peso 18,5 kg Carga máx. 60 kg

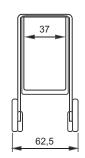


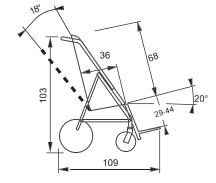


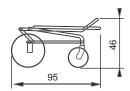

Obi 4 Peso 20,1 kg Carga máx. 70 kg

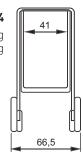

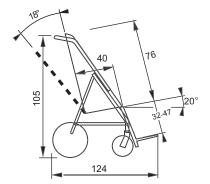

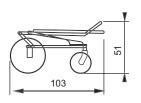

OBI Version 1.0 - 2017/10

Las dimensiones están indicadas en centímetros. Asegúrese de que sus medidas entran en el rango de centímetros indicados.



