

The logo features a stylized orange swoosh above the word "QUICKIE" in a bold, sans-serif font. Below it, the tagline "Live without limits." is written in a smaller, simpler font.

QUICKIE
Live without limits.

Salsa R²®





Salsa R²®

Silla de exterior compacta y ajustable



Rendimiento en exteriores

- Estructura **robusta**, ideal para la conducción por terrenos irregulares
- Potente: con **baterías de gel de 60 Amp** (70 Amp opcionales) y motores de 6 km/h (10 Km/h opcionales, de 2 ó 4 polos)
- **Ruedas grandes** de 9" y 10" (delanteras) y de 12" y 14" (traseras).
- Suspensión ajustable en las ruedas motrices para un mayor confort y maniobrabilidad
- Permite superar obstáculos de hasta 10 cms (con la opción de subbordillos)
- Luces (opcionales)
- Testada para el transporte en vehículos
- Pendiente máxima de seguridad: 8°

Movilidad en interiores

- **Base compacta** (desde sólo 80 cm de longitud sin reposapiés)
- **Altura baja de asiento al suelo** para facilitar el acceso a mesas (desde 42 cm).
- **Anchura total reducida** que permite el acceso a través de puertas estrechas (60 cms con ruedas de 12" y 62 cms con 14")*

* Con anchos de asiento de 48 y 51 cm, la anchura de la silla puede verse aumentada

Un único asiento ajustable a todas las tallas

La unidad de asiento es totalmente ajustable en anchura y profundidad entre 41 y 51 cm, por lo que una misma silla se puede ajustar a las medidas de diferentes usuarios y a sus cambios. El respaldo también es ajustable en anchura entre 41 y 51 cm y en altura en 3 posiciones.



Unidad de asiento totalmente ajustable:

- Anchura de asiento: 41, 43, 46, 48 y 51 cm
- Profundidad de asiento: 41, 43, 46, 48 y 51 cm
- Respaldo ajustable en altura en 3 posiciones (46, 48.5* y 51 cm)
- Respaldo ajustable en ángulo en 6 posiciones (-4, 0, 4, 8, 12 y 16°)
- Altura de asiento: 42, 44 cm (con ruedas de 12")
- Altura de asiento: 43, 45 cm (con ruedas de 14")
- 4 ángulos de asiento (0, 3*, 6 y 9°)
- Reposabrazos abatibles, ajustables en altura, ángulo y longitud
- Posibilidad de instalar otros cojines y respaldos (Comfort, Jay 3...)

* pre-establecido de fábrica

Facilita las transferencias

- Reposabrazos y mandos abatibles
- Reposapiés abatibles y extraíbles
- Protectores laterales fáciles de retirar

Seguridad

- Luces de LED integradas en la carcasa (opcionales)
- Testada para el transporte en vehículos (4 puntos de anclaje)
- Suspensión trasera



Numerosas opciones disponibles



Opciones eléctricas disponibles:

- Basculación eléctrica mediante vástago de 3° a 20°
- Basculación eléctrica de 0° a 30° o de -5 a 25°
- Reclinación eléctrica de -5° a 30°
- Elevación y basculación eléctrica
- Reposapiés elevables eléctrica o manualmente
- Mandos R -Net
- Posibilidad de añadir opciones eléctricas a posteriori (100% compatibles con Salsa® tracción central)

Otras opciones disponibles:

- Asiento y respaldo Comfort
- Ruedas traseras neumáticas
- Motores de 10 km/h (2 o 4 polos)
- Luces e Indicadores
- Reposacabezas
- Espejo retrovisor
- Subebordillos
- Soporte de bastones

Electrónica avanzada

Mando VR-2 como standard (hasta 2 opciones eléctricas)

- Mando VR2 para Luces e Indicadores (opcional)
- Caja de control de 70 Amp como standard (90 Amp opcional)
- Mando para usuario y acompañante (opcional)

Mando R-net opcional (para más de 2 opciones eléctricas)

- Preparado para futuras opciones, sin necesidad de reprogramar
- Permite controlar hasta 6 actuadores desde el mismo mando (con el módulo auxiliar)
- Caja de control de 90 Amp
- Mando de control con LED's con 8 botones asignables (sólo en el mando para Luces e Indicadores)
- Opción de controlar el PC con el joystick a través de Bluetooth ®
- Mando para usuario y acompañante (opcional)

Fácil mantenimiento y transporte



- Fácil acceso a la caja de control y a las baterías
- Las baterías pueden cambiarse con el usuario sentado en la silla, retirando la carcasa de la parte trasera
- El respaldo se extrae para facilitar el transporte

Salsa R²[®]


Rendimiento en exteriores,
movilidad en interiores



Ajustes de la unidad de asiento

Profundidad de asiento:	Ajustable de 41 a 51 cm	Altura de respaldo:	Ajustable 46 , 48.5 y 51 cm
Anchura de asiento:	Ajustable de 41 a 51 cm	Ángulo de respaldo:	Ajustable -4°, 0°, 4°, 8°, 12°, 16°
Altura de asiento:	42, 44 cm (rueda de 12", sin módulos)	Longitud del reposabrazos:	Ajustable de 31 a 41 cm
	43, 45 cm (rueda de 14", sin módulos)	Altura del reposabrazos:	Ajustable de 22 a 31 cm
Ángulo de asiento:	Ajustable 0°, 3°, 6°, 9°		

Especificaciones técnicas

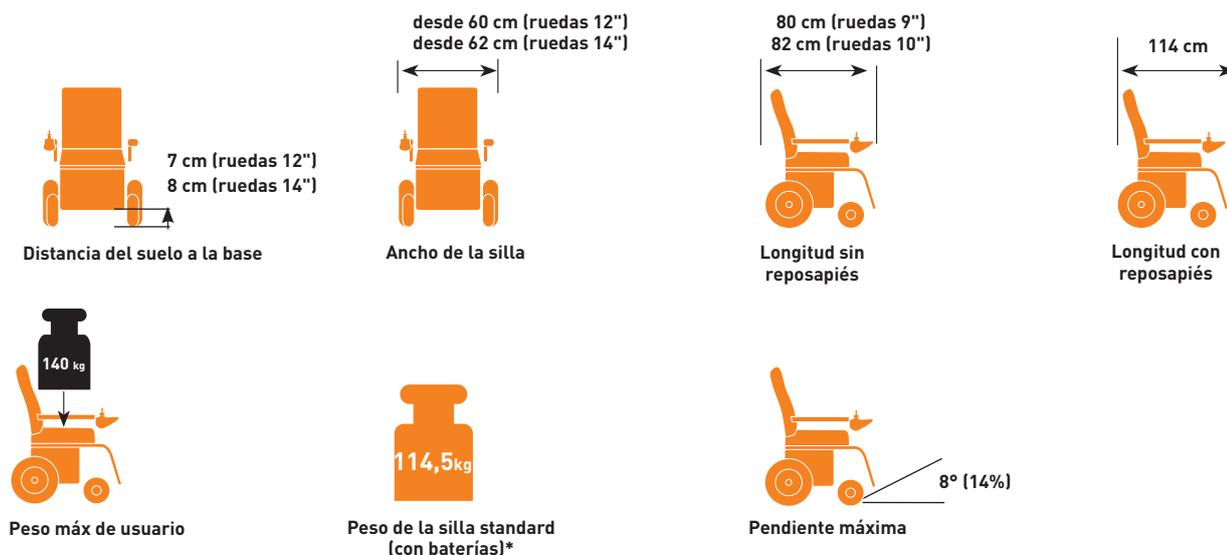

* El peso de la Salsa sin baterías es de 77.5 kg. El peso total depende de las opciones seleccionadas

Velocidad:	6 km/h (10 km/h opcional)	Superación de obstáculos con subebordillos:	8,5 cm (12"), 10 cm (14")
Baterías:	60 Amp (70 Amp opcional)	Superación de obstáculos sin subebordillos:	4 cm (12"), 5 cm (14")
Radio de giro:	85 cm (12"), 91 cm (14"), 120 cm máx.	Color de armazón:	Rojo, azul y blanco

Tolerancia de Fábrica +/- 1 cm

Para ampliar información sobre opciones y disponibilidad por favor consulte la hoja de pedido.
Nuestros productos están en constante proceso de mejora, por lo que Sunrise Medical se reserva el derecho de cambiar el diseño de los mismos y las especificaciones indicadas sin previo aviso



Sunrise Medical S.L
Polígono Bakiola, 41
48498 Arrankudiaga
Vizcaya, España

Tel: 902 14 24 34
Fax: 94 648 15 75

www.SunriseMedical.es



Rev.1 - Junio 2015