

GRÚA BÁSICA POOL E-185

CONFORME A LA NORMA EN ISO 10535: 2007 APLICABLE A LAS GRÚAS PARA LA TRANSFERENCIA DE PERSONAS DISCAPACITADAS

- **Grúa adaptada** para los pacientes que pesan hasta 185 kg.
- **Transferencia** de la silla de ruedas a la piscina.
- **Ergonómica:** recoge a una persona del suelo, rango de elevación hasta 2,10m. Fácil manejabilidad gracias a sus anchas empuñaduras.
- **Robusta:** gracias a los materiales utilizados y al motor LINAK.



Apertura de patas manual con la ayuda de un sistema de pedal

Práctica:

- Estudiada para su uso en piscinas
- 2 tipos de bases de rotación:
 - Para empotrar en el hormigón
 - Para atornillar directamente al suelo
- Plegable
- Rotación de la percha de 360°
- Accesorios:
 - Camilla especial para piscinas
 - Silla especial para piscinas



Ref 102195001
Base para empotrar



Ref 102195002
Base para atornillar



Ref 102106004 - Amés silla




Ref 102106003 - Amés camilla

Seguridad:


- Caja de control con parada de emergencia e indicador de carga integrado.
- Alarma sonora: indicación de batería baja.
- Sistema de bajada de emergencia eléctrico y manual.
- Estructura metálica de acero inoxidable recubierto pintura epoxy

La batería es desmontable y recargable en la grúa o con un cargador externo (opcional)


- 1 Indicador de carga
- 2 Pulsador de parada de emergencia
- 3 Bajada de emergencia eléctrica

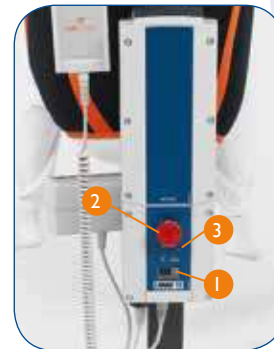


Batería desmontable

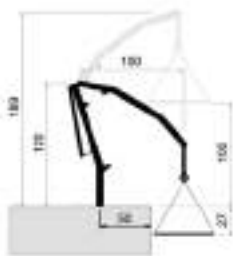

Base empotrable

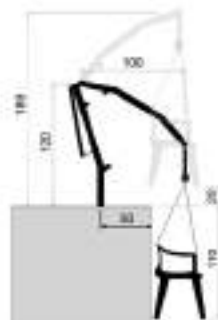

Base atornillable

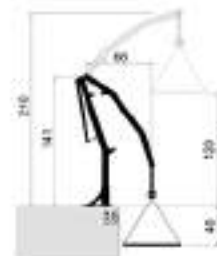

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Descripción	Referencia	NORMA	MOTOR	PESO
Pool E185	102102006	ISO 10535 EN 12182	Linak IP54	36,35 Kg

Una garantía de:

- 5 años para la estructura y los componentes eléctricos*
- 1 año para las baterías*

* En condiciones normales de utilización, ver el manual de uso.



Virmedic S.L. Grupo WinnCare C/ Perellonet, 1 – 46909 Torrente (Valencia) – España
Tel : +34 9 61 56 55 21 – Fax : +34 9 61 56 03 83 – E-mail : ventas@winnCare.es

www.winnCare.es



Con el propósito de mejora permanente de sus productos, el GRUPO WINNCARE se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las características técnicas - fotografías no contractuales.

Fabricado por



WINNCARE
S p a i n