

| | |
|------------------|---------|
| ROHO AGILITY | 106-107 |
| QUADTRO SELECT | 108 |
| CONTOUR SELECT | 109 |
| ENHANCER | 110 |
| HYBRID ELITE | 111 |
| SOFFLEX & MOSAIC | 112 |
| AIR LITE | 113 |
| BODITRAK | 114 |
| OTROS PRODUCTOS | 115 |

ROHO & MAPA DE PRESIONES





ESPECIFICACIONES


- Incluye: Carcasa de aluminio, hardware, almohadilla de espuma, soporte de espuma lumbar, funda, conjunto de herramientas para la instalación, manual de instrucciones, inserción de aire ajustable, kit de reparación y bomba de aire.
- Peso del respaldo. No incluye el hardware del tubo del respaldo (300gr):
36cmX26cm, aprox. 1,2KG
41cmX41cm aprox. 1,8KG
51cmX51cm aprox. 2,3KG
- Carga máxima de 136KG.
- Garantías limitadas: Carcasa de respaldo y Hardware tienen una garantía de 36 meses; la inserción de aire 18 meses; la funda y espuma 6 meses.

ROHO AGILITY®

MINIMUM CONTOUR™
MID CONTOUR™
MAX CONTOUR™




El sistema de respaldos Roho Agility®, es el primer sistema que incorpora la tecnología necesaria para aquellos usuarios que precisan de un ajuste perfecto y un soporte sólido y seguro. Gracias al exclusivo sistema de fijación rápida, nunca ha resultado tan fácil y rápido de montar y desmontar un respaldo. El sistema Agility® es totalmente ajustable.

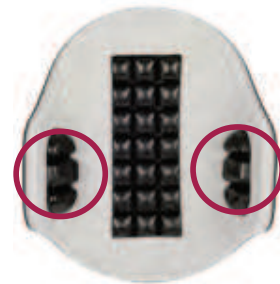

ESTABILIDAD
CELDAS DE AIRE LATERALES
(SÓLO MODELO MAX CONTOUR)

MINIMUM CONTOUR™

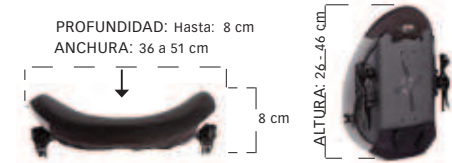

MID CONTOUR™



MAX CONTOUR™



DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA TÉCNICA

PARA OTRAS SOLUCIONES DUDAS O MEDIDAS ESPECIALES PONEMOS A SU DISPOSICIÓN NUESTRO EQUIPO DE PROFESIONALES.

902 48 72 72
info@rehagirona.com

3 AÑOS DE GARANTÍA

QUADTRO SELECT[®]

HIGH PROFILE™ MID PROFILE™ LOW PROFILE™
(PERFIL ALTO • 10CM) (PERFIL MEDIO • 8CM) (PERFIL BAJO • 5CM)



APLICACIONES

- Riesgo alto (perfil alto) medio-alto (perfil medio y bajo) de escaras.
- Con posturas asimétricas.
- Necesidades de un alto nivel de soporte postural.
- Necesidades de posicionamiento progresivo.
- Diagnósticos evolutivos.
- Poco equilibrio en sedestación.
- Utilización en sillas con basculación y reclinación.



CARACTERÍSTICAS

- Celdas de 10 (perfil alto), 8 (perfil medio), 5 (perfil bajo) cm de altura.
- Funda transpirable, elástica, lavable.
- Las celdas individuales se ajustan a cada perfil.
- Fabricado en goma de neopreno resistente al fuego M2.
- Fácil de limpiar con jabón neutro y agua.
- Sin límite de peso.
- Cada cojín incluye: funda, bomba de inflado, kit de reparación y manual de instrucciones.
- Peso de 1,7KG.




DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA TÉCNICA

PARA OTRAS SOLUCIONES DUDAS O MEDIDAS ESPECIALES PONEMOS A SU DISPOSICIÓN NUESTRO EQUIPO DE PROFESIONALES.

902 48 72 72
info@rehagirona.com

El cojín Quadtro Select[®] combina las cualidades de posicionamiento, protección de la piel y estabilidad. Cada usuario puede beneficiarse de una adaptación personalizada del cojín mediante el simple accionamiento de un botón. La válvula revolucionaria Isoflo Memory Control[®] ofrece diferentes maneras de ajustar el cojín mientras el usuario está sentado, permitiendo de manera fácil y rápida, el ajuste personalizado para maximizar su función.

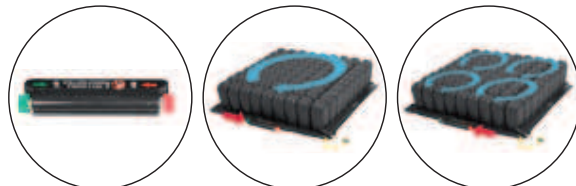



ROHO ISOFLO MEMORY CONTROL

VALVULA ABIERTA

VALVULA CERRADA

MAPA DE PRESIÓN

El cojín proporciona una distribución uniforme de la presión en toda su superficie, reduciendo los picos de presión en las zonas críticas.

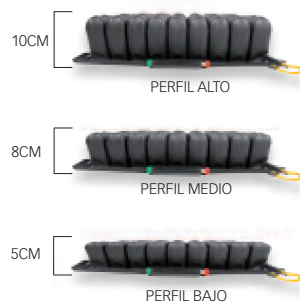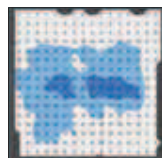

3 AÑOS DE GARANTÍA

CONTOUR SELECT[®]

PERFIL • 10, 8, 5CM



APLICACIONES

- Riesgo alto de escaras.
- Posturas simétricas o ligeras asimétricas.
- Poco equilibrio en sedestación.
- Necesidades de un soporte postural de nivel alto.
- Patologías evolutivas.



CARACTERÍSTICAS

- Celdas de 10, 8 y 5cm de altura.
- Funda transpirable, elástica, lavable.
- Las celdas individuales se ajustan a cada perfil.
- Fabricado en goma de neopreno resistente al fuego M2.
- Fácil de limpiar con jabón neutro y agua.
- Sin límite de peso.
- Cada cojín incluye: funda, bomba de inflado, kit de reparación y manual de instrucciones.
- Peso de 1,7KG.

El cojín Contour Select[®] suministra la protección de la piel que se espera de un producto Roho[®] con el posicionamiento y la estabilidad necesarios para incrementar su funcionalidad. El diseño del cojín junto a una simple operación de la válvula memorizadora Isoflo[®], proporciona un nivel de control postural y estabilidad que nunca se había alcanzado antes de un cojín de aire. Su composición en 3 niveles, con celdas de 10, 8 y 5cm de altura colocadas estratégicamente, mejora la estabilidad lateral en la silla de ruedas y centra al usuario cómodamente en el medio del cojín.




ROHO ISOFLO MEMORY CONTROL

VALVULA ABIERTA

VALVULA CERRADA

MAPA DE PRESIÓN

El cojín proporciona una distribución uniforme de la presión en toda su superficie, reduciendo los picos de presión en las zonas críticas.

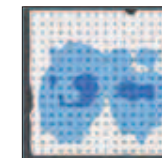

DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA TÉCNICA

PARA OTRAS SOLUCIONES DUDAS O MEDIDAS ESPECIALES PONEMOS A SU DISPOSICIÓN NUESTRO EQUIPO DE PROFESIONALES.

902 48 72 72
info@rehagirona.com



APLICACIONES

- Riesgo alto de escaras.
- Necesidad de algunos grados de abducción / aducción.
- Poco equilibrio en sedestación.
- Típica postura de asiento sobre el sacro.



CARACTERÍSTICAS

- Celdas de 10, 8 y 5cm de altura.
- Funda transpirable, elástica, lavable con espuma confort.
- Las celdas individuales se ajustan a cada perfil.
- Fabricado en goma de neopreno resistente al fuego M2.
- Fácil de limpiar con jabón neutro y agua.
- Sin límite de peso.
- Cada cojín incluye: funda, bomba de inflado, kit de reparación y manual de instrucciones.
- Peso de 1,7KG.



DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA TÉCNICA

PARA OTRAS SOLUCIONES DUDAS O MEDIDAS ESPECIALES PONEMOS A SU DISPOSICIÓN NUESTRO EQUIPO DE PROFESIONALES.

902 48 72 72
info@rehagirona.com

ROHO® ENHANCER®

PERFIL • 10, 8, 5CM



El cojín Enhancer® está dotado de 2 válvulas que regulan 2 compartimentos independientes, exterior e interior. El resultado es una correcta alineación y rotación de los fémures y reducción de la presión sobre el hueso sacro y el coxis. Su composición en 3 niveles, con celdas de 10, 8 y 5 cm de altura colocadas estratégicamente, mejora la estabilidad lateral en la silla de ruedas y centra al usuario cómodamente en el medio del cojín.




DOBLE VÁLVULA



MAPA DE PRESIÓN

El cojín proporciona una distribución uniforme de la presión en toda su superficie, reduciendo los picos de presión en las zonas críticas.

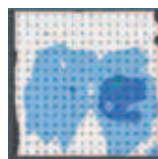

APLICACIONES

- Riesgo medio-alto de escaras.
- Que requieran un óptimo posicionamiento y alineación de la pelvis y las piernas.
- Posturas asimétricas y/o necesiten posicionamiento lateral o anterior /posterior más estable (mediante la inserción del cojín con compartimento dual, en varias medidas).
- Necesidades de un soporte postural de nivel alto.
- Patologías evolutivas.



CARACTERÍSTICAS

- Funda transpirable, elástica, lavable con espuma confort.
- Las celdas individuales se ajustan a cada perfil.
- Fabricado en goma de neopreno resistente al fuego M2.
- Peso máximo usuario: 225KG
- Cada cojín incluye: funda, bomba de inflado, kit de reparación y manual de instrucciones.
- Peso de 1,5KG.



DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA TÉCNICA

PARA OTRAS SOLUCIONES DUDAS O MEDIDAS ESPECIALES PONEMOS A SU DISPOSICIÓN NUESTRO EQUIPO DE PROFESIONALES.


902 48 72 72
info@rehagirona.com




HYBRID ELITE®




Protección de la piel, posicionamiento y estabilidad. El cojín Roho® Hybrid Elite® combina la excelente protección de la piel y adaptabilidad al contorno del usuario de la tecnología Roho® Dry Floatation®, con la estabilidad de una base de espuma rígida Jay®.

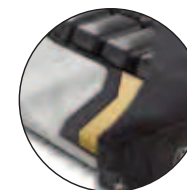

FUNDA CON ESPUMA CONFORT

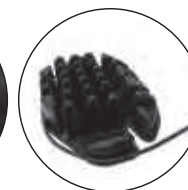


1 VÁLVULA DE INFLADO

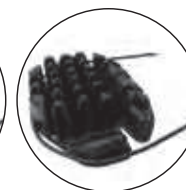

2 VÁLVULAS DE INFLADO

MAPA DE PRESIÓN

El cojín proporciona una distribución uniforme de la presión en toda su superficie, reduciendo los picos de presión en las zonas críticas.

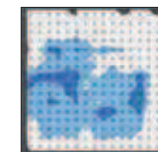

FUNDA



CELDA DE AIRE



BASE DE ESPUMA RÍGIDA





APLICACIONES

- Historial de daños en piel y/o tejido
- Riesgo moderado - leve de escaras
- Daño actual en la piel o tejido suave
- Sensibilidad plena o limitada en la zona de asiento
- Cierto equilibrio en sedestación
- Necesidad de confort y apoyo
- Control de equilibrio en posición sedente
- Corregir asimetrías de la pelvis de hasta aprox. 2,5 cm.



CARACTERÍSTICA

- Ajustable a cada forma y peso
- Ajustable a cambios futuros en el posicionamiento del usuario
- distribución hidrostática de la carga a toda el área de contacto
- Proporciona hasta aprox 5 cm de inmersión
- Ligero, añade poco peso a todo el sistema
- Fácil limpieza y desinfección del cojín
- Funda lavable a máquina y desinfectable
- Posibilidad de reparación mediante parche para extender el uso



DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA TÉCNICA

PARA OTRAS SOLUCIONES DUDAS O MEDIDAS ESPECIALES PONEMOS A SU DISPOSICIÓN NUESTRO EQUIPO DE PROFESIONALES.

902 48 72 72
info@rehagirona.com

ROHO

SOFFLEX®

PERFIL • 7,5CM



El cojín Roho Sofflex®, ha sido diseñado para poder ajustarse correctamente y para proporcionar a la piel la protección ideal para cada paciente. Es apto para usuarios de hasta 136Kg. de peso. El cojín debe escogerse atendiendo a las medidas necesarias de cada usuario. Roho® recomienda que un profesional experto en sedestación y posicionamiento valore si el cojín Sofflex® es apropiado para las necesidades de cada usuario particular.

MOSAIC®

PERFIL • 7,5CM



El cojín Mosaic®, compuesto de celdas de aire interconectadas de 7,5 cm de polivinilo, está indicado para usuarios que necesitan una leve protección de la piel. Es apto para usuarios de hasta 114kg. de peso. Manejable y muy ligero, está diseñado para facilitar un ambiente cómodo, funcional y estable.

REHAGIRONA.COM



APLICACIONES

- Riesgo bajo de escaras
- Con sensibilidad parcial o total
- Usuarios que puedan realizar sus propios cambios posturales
- Necesidades básicas de posicionamiento
- Necesidad de un cojín ligero
- Sin necesidad de ajustes



CARACTERÍSTICA

- Funda transpirable, impermeable, elástica, lavable
- Fabricado en espuma de poliuretano, con celdas de aire insertadas
- Fácil de limpiar con jabón neutro y agua
- Peso máximo usuario: 114kg
- Cada cojín incluye: funda y manual de instrucciones
- Peso de 1kg



DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA TÉCNICA

PARA OTRAS SOLUCIONES DUDAS O MEDIDAS ESPECIALES PONEMOS A SU DISPOSICIÓN NUESTRO EQUIPO DE PROFESIONALES.

902 48 72 72
info@rehagirona.com


ROHO

AIR LITE®

COJÍN ANATÓMICO



El cojín AirLite® combina los beneficios de un soporte de aire en la parte posterior y una base de espuma pre-modelada que le permiten suministrar un correcto soporte postural y una óptima durabilidad. El soporte insertado de aire usa la patentada tecnología de Air Floatation® de Roho®, mientras un contorno de espuma de alta densidad posiciona al cuerpo de forma cómoda. Esta novedosa combinación le convierte en uno de los cojines más eficaz y sencillo del mercado. Con sólo 1 kg de peso, continúa con la tradición de productos ligeros del grupo Roho®.

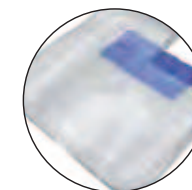

REHAGIRONA.COM



ESPECIFICACIONES STD

- Tejido elástico e inteligente de última generación.
- Electrónica integrada - sin necesidad de interfaz externo, solamente con un conector USB a tu ordenador o conexión Wifi..
- Frecuencias de escaneo más rápidas. (ej. sensor de colchón escanea a 50Hz).
- Los datos de calibración y del sensor se almacenan en la misma Manta de Presiones, para garantizar una mejor experiencia del usuario, se conecta al PC y listo.
- Fácil limpieza y desinfección.
- Posibilidad de tallas y formas a medida.
- Soporte técnico.



SEDESTACIÓN EN SILLA DE RUEDAS



VALORACIÓN DEL CENTRO DE GRAVEDAD DE LAS SILLAS DE RUEDAS (COG)




VALORACIÓN EN SUPERFICIES HORIZONTALES



BODITRAK

LA NUEVA GENERACIÓN EN MAPAS DE PRESIÓN

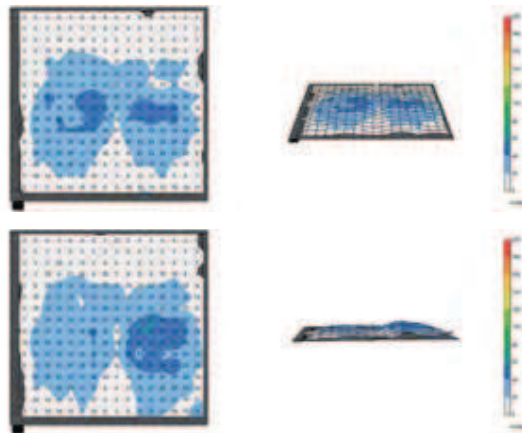

Los sistemas de valoración BodiTrak para asiento, cama y pies utilizan sensores elásticos de última generación, con electrónica USB integrada: Flexible, elástico, portátil, de fácil uso y al alcance de todos.

Simplemente conecta el cable USB a tu ordenador o tableta Android y ya estará listo para ser usado.



OTROS PRODUCTOS

COJINES TERAPÉUTICOS



MINI-MAX




COLCHÓN DRY FLOATATION



COLCHÓN SOFFLEX 2



ADAPTOR

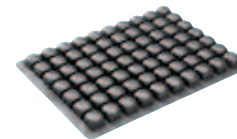

HEAL PAD



COJÍN DE DUCHA



COJÍN PARA WC



ACCESORIOS

